BANO®
Designed for care

DK
DE
EN
FR
NL
NO
SU
SE

17/09/26

ANVÄNDARMANUAL
CLEAN COMFORT GOLVSTÅENDE

280349 BANO CLEAN COMFORT WC-SKÅL GOLVSTÅENDE
801591 BANO FAST TUNN KASSETT/FIXTUR MED WC-STÖDHANDTAG
801976 BANO FAST TUNN KASSETT/FIXTUR UTAN WC-STÖDHANDTAG



Bano AS
Industrivegen 22
6823 Sandane

Telefon: +47 57 86 98 00
www.banoconcept.se
E-post: post@bano.no

Innehåll

Introduktion.....3
Säkerhetsföreskrifter.....5
Specifikationer.....6
Tekniska ritningar.....7
Översikt över spol- och torkfunktioner.....8
Fjärrkontroll Clean Comfort.....9
One-Touch-kontroll för Clean Comfort.....16
Skötsel, service och rengöring.....17
Start och parkoppling av fjärrkontroll.....23
Felsökning.....25
Reservdelar.....29
Placering av produktmärkning och identifiering.....29

Bano Clean Comfort Golvstående

Den golvstående Clean Comfort är en integrerad spol- och torktoalett som kombinerar hög funktionalitet med flexibel installation. Tack vare sin IPX6-klassning kan den installeras i våtutrymmen, även i duschzonen. Den robusta konstruktionen gör det dessutom möjligt att använda toaletten som duschstol, vilket bidrar till en tryggare och mer tillgänglig badrumsmiljö.

Designad för självständighet och tillgänglighet

Clean Comfort är utformad för att underlätta intimhygien och öka självständigheten för personer med olika behov.:

- För personer med nedsatt rörlighet: Intuitiva reglage och individuellt anpassningsbara inställningar underlättar användningen.
- För personer med nedsatt sittstabilitet: Den robusta konstruktionen ger stöd vid toalettbesök och sittande duschning.
- För vård- och omsorgspersonal: Kan minska behovet av manuella förflyttningar och underlätta assistans vid personlig hygien.

Hygienisk och hållbar konstruktion

- Hygieniska material: Tillverkad av lättstädad plast och porslin för enkel rengöring och god hygien.
- Hållbar design: IPX6-klassningen säkerställer långvarig funktion även i våtrumsmiljöer.
- Stark konstruktion: Porslinsskålen är robust och utformad för att klara en användarvikt på upp till 200 kg.

Förbättrade komfortfunktioner

- Uppvärmd toalettsits: Ger värme och trygghet
- Nattbelysning: Inbyggd i sitsen för ökad trygghet och enklare användning vid toalettbesök nattetid.





Luktborttagning och automatisk tvättfunktion

- Inbyggd luktneutralisering: Ett integrerat luftfilter reducerar obehagliga lukter direkt från skålen och bidrar till en fräschare badrumsmiljö.
- Flexibla spol- och torkfunktioner: Välj mellan manuella funktioner för bakre spolning, främre spolning och torkning eller automatiska program som kombinerar spolning och torkning.
- Individuellt anpassningsbara inställningar: Både manuella funktioner och automatiska program erbjuder inställningsmöjligheter för att anpassa hygienen efter användarens behov:
  - Justerbar vattentemperatur, vattenmängd och munstycksposition
  - Pulserande spolning och rörligt munstycke.
  - Justerbar lufttemperatur och torktid

Enkel styring med fjärrkontroll


- Både standardfjärrkontrollen och den intuitiva fjärrkontrollen ger enkel åtkomst till två automatiska program, stoppfunktion och torkning. Det underlättar användningen för personer med nedsatt rörlighet.
- Som tillval finns en rotationsknapp på sitsens sida för enkel styrning av spol- och torkfunktionen.

Flexibel placering med IPX6-skydd

Med sin IPX6-klassning erbjuder toaletten:

- Möjlighet till installation i duschzonen för ökad flexibilitet.
- Möjlighet att även användas som duschstol, vilket kan bidra till ökad trygghet och självständighet.
- Ett högt skydd mot vatten, anpassat för användning i våtrumsmiljöer.

Den vägghängda spol- och torktoaletten Clean Comfort kombinerar funktionalitet, stilren design och tillgänglighet. Med sin IPX6-klassning kan den installeras flexibelt, även i duschzonen. Den är utformad för att främja självständighet, god hygien och komfort för äldre och personer med funktionsvariation.

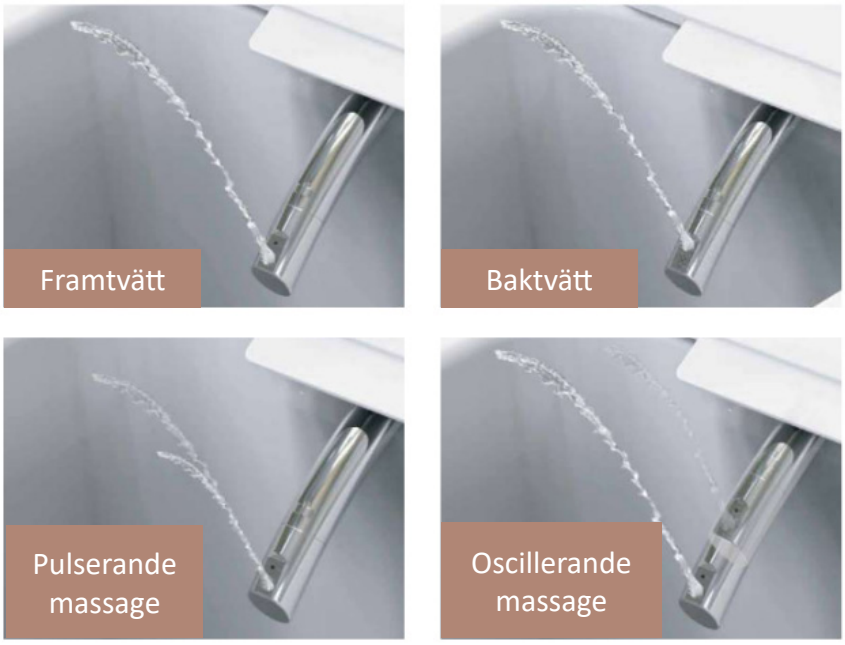

Säkerhetsföreskrifter


Leverantören ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår till följd av att följande säkerhetsanvisningar inte följs.

- Jordanslutning: Apparaten är en elektrisk apparat av klass I och måste anslutas till ett korrekt jordat elsystem.
- Installation och ventilation: Apparaten får inte installeras på en plats där den riskerar att utsättas för vattenstänk utöver vad den är konstruerad för eller för höga temperaturer. Badrummet ska ha tillräcklig ventilation, exempelvis genom en fläkt eller ventilationsöppning.
- Skadad strömsladd: Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller annan behörig person för att undvika fara.
- Användning: Apparaten får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillsyn eller instruktioner om säker användning och förstår riskerna. I sådana fall rekommenderas lågt vattenflöde/-tryck och låg vattentemperatur.
- Barn och rengöring: Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Vattenanslutning: Apparaten ska vara permanent ansluten till vattenförsörjningen. Vattentillförseln ska endast kopplas bort vid installation eller underhåll.


- Sätt aldrig i eller dra ur nätkontakten med våta händer. Det finns risk för elektriska stötar.
- Skada inte nätkabeln eller nätkontakten. Det kan medföra risk för elektriska stötar, kortslutning och brand.
- Använd inte ett eluttag som sitter löst. Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten för att undvika elektriska stötar och brand.
- Anslut apparaten till en strömförsörjning som uppfyller gällande föreskrifter. Felaktig anslutning kan skada produkten och medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Demontera, reparera eller bygg inte om produkten på egen hand. Det kan medföra risk för elektriska stötar och brand.
- Placera inte värmekällor eller öppen låga i närheten av produkten. Det finns risk för brand.
- SLåt inte vatten, rengöringsmedel eller organiskt material komma i kontakt med nätkontakten. Det kan medföra risk för elektriska stötar, produktskador och brand.
- Vänd inte produkten upp och ned, eftersom det kan orsaka skador.
- Böj eller vrid inte inloppsslangen. Det kan orsaka skador och vattenläckage.
- Använd de nya slangar som medföljer apparaten. Återanvändning av befintliga slangar rekommenderas inte.

Tvätt	Baktvätt	✓
	Framtvätt	✓
	Massage	✓
	Justerbar vattentemperatur	AV/5 steg (standard 3:e)
	Justerbar flödeshastighet	AV/5 steg (standard 3:e)
	Justerbar duscharm	AV/5 steg (standard 3:e)
Varm luft	Lufttorkning	✓
	Justerbar lufthastighet	5 steg (standard 3:e)
	Justerbar torktemperatur	AV/5 steg (standard 3:e)
Uppvärmd sits	Uppvärmd sits	✓
	Justerbar sitstemperatur	AV/5 steg (standard 3:e)
Hygien	Deodoriser	✓
	Munstycke automatisk rengöring	✓
	Munstycke Manuell rengöring	✓
Avkalkning		✓
Användarlägen		2 användare
Nattljus		✓
Indikatorlampa (vred)		✓
Mjukstängande sits och lock		✓
Tillbehör		✓
Kantlös WC-skål		✓
Installationstyp		Golvstående
Anslutning av vattenförsörjning		G 1/2
Märkspänning		AC220-240V, 50/60Hz
Effekt		1170W
Längd på nätsladden		1.8m
Vattentillförseltryck		0.07-0.75MPa (0.7-7.5Bar)
Vattentillförseltemperatur		4-35°C
Omgivningstemperatur		4-40°C
Skyddsgrad		IPX6
Tvättfunktion	Flödeshastighet	350-650mL/min
	Vattentemperatur	31-39°C
	Tvättcykeltid	3 minutes
	Uppvärmningsläge	Tank
	Vattenvärmarens effekt	1200W
	Säkerhetsanordning	Termiska säkringar/vätskenivåbrytare/termostat
	Backflow Prevention	Luftspalt, AB-typ
Torkfunktion	Lufthastighet	≥ 4m/S
	Tork effekt	350W
	Torktid	3 minuter
	Varm lufttemperatur	35-50°C
	Säkerhetsanordning	Termiska säkringar/termostat
Luktborttagning	Luktborttagningsläge	Diatom
	Luktborttagningens cykeltid	15 minuter
Uppvärmd sits	Sitsvärmarens effekt	50W
	Sitstemperatur	29-37°C/AV
	Säkerhetsanordning	Termiska säkringar/termostat
Fjärrkontroll	Frekvensintervall	2460MHz
	Maximal RF-utgångseffekt	-9.04dBm
	Antal/typ av batterier	3V CR2032 - 2 stycken
Andra säkerhetsanordningar		Jordfelsbrytare
Max användarvikt		200kg
Vikt på WC-skål och spol-/och torksits		31.5kg

Tekniska ritningar

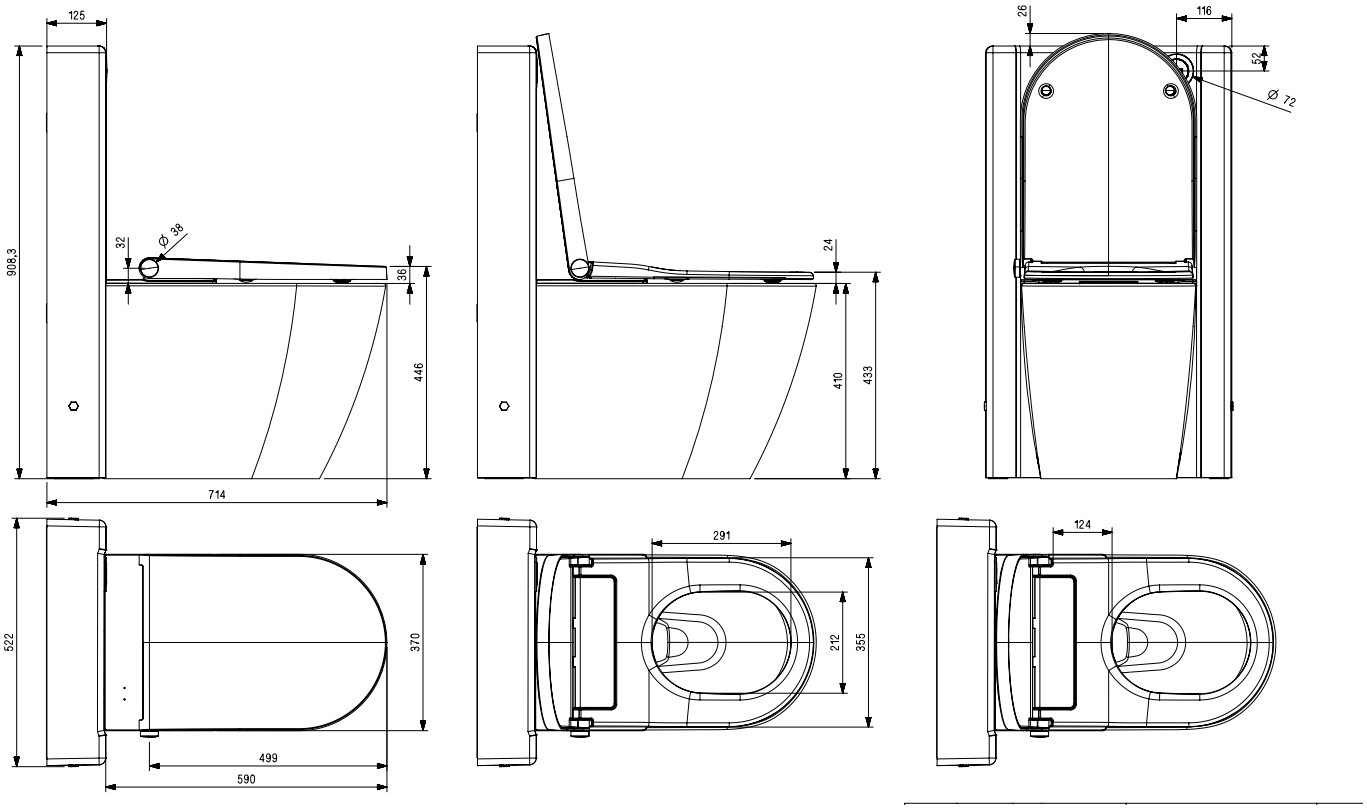


Med valfria armstöd

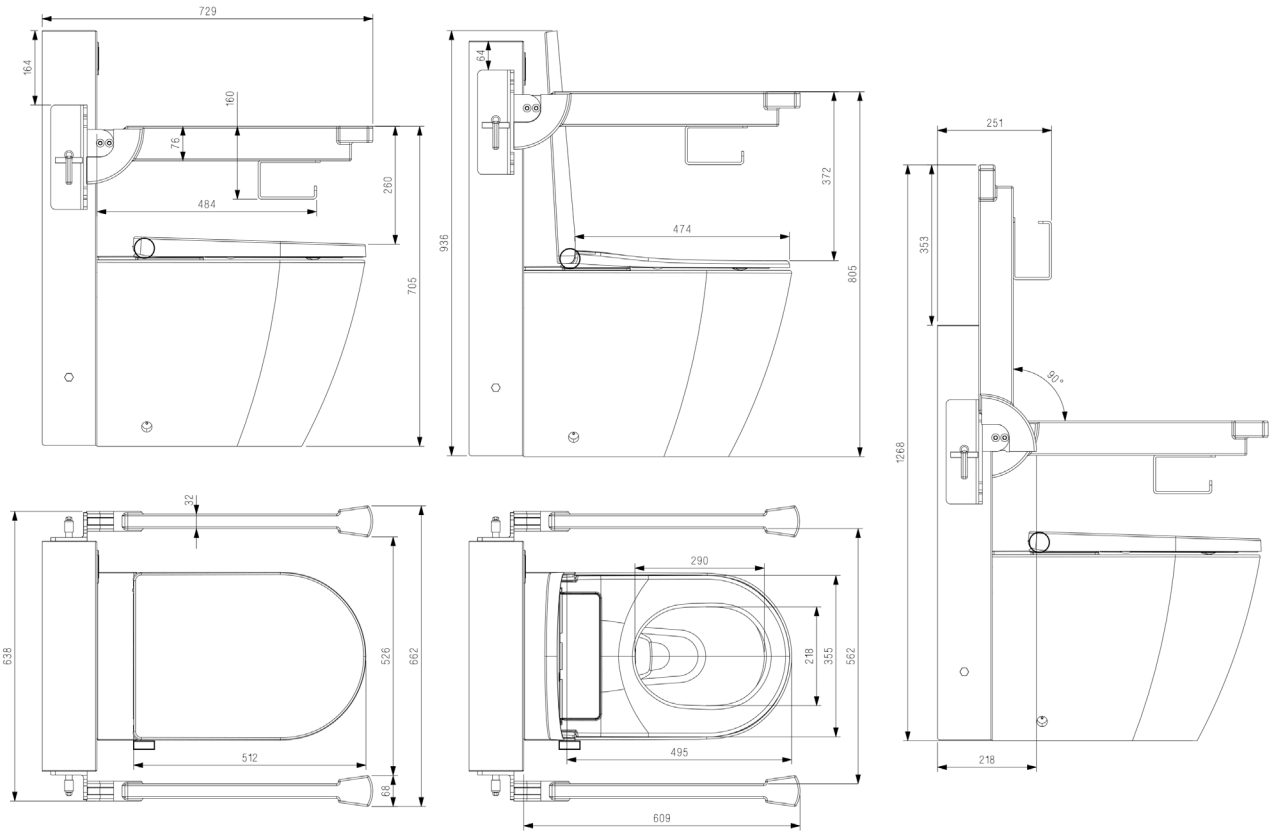

Alla dimensioner är i mm


SE

Spol- och torköversikt

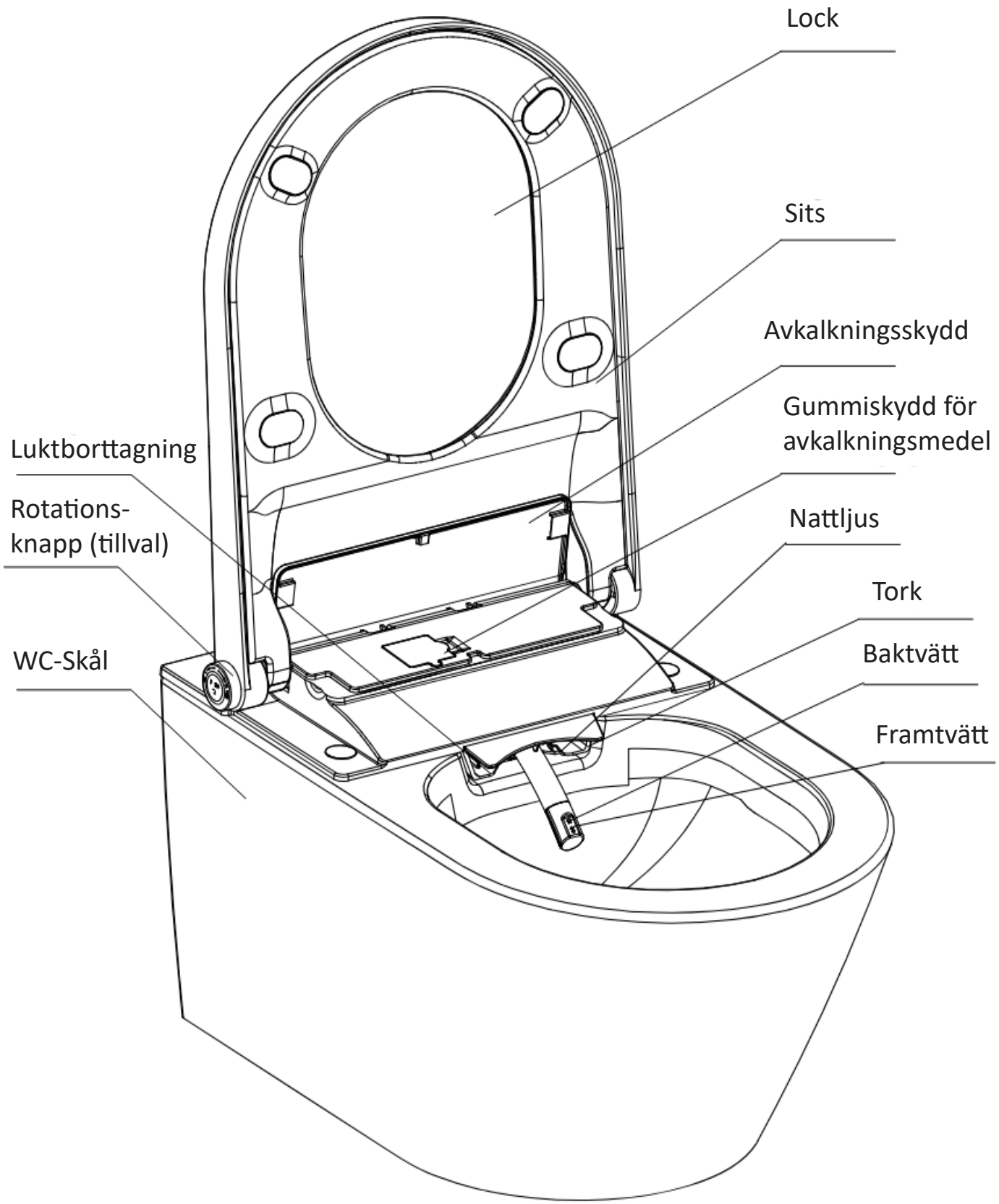


Bilderna är endast för referens.

Fjärrkontroll Clean Comfort (801687) (Automatisk spolning)

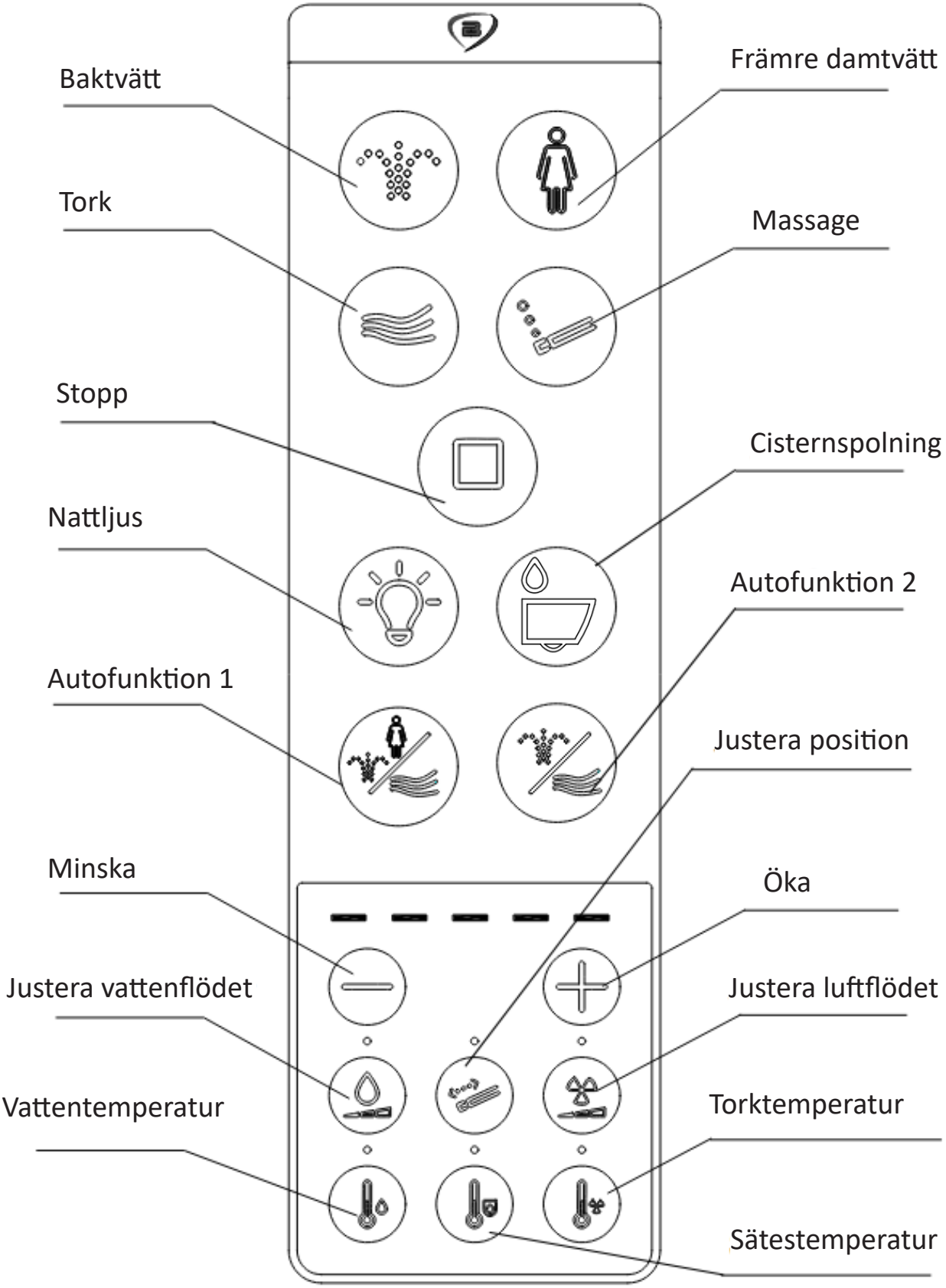

Fjärrkontrollen kräver batterier (2x 3V CR2032)


One-Touch Kontroll för Clean Comfort (801689) (Tillbehör)

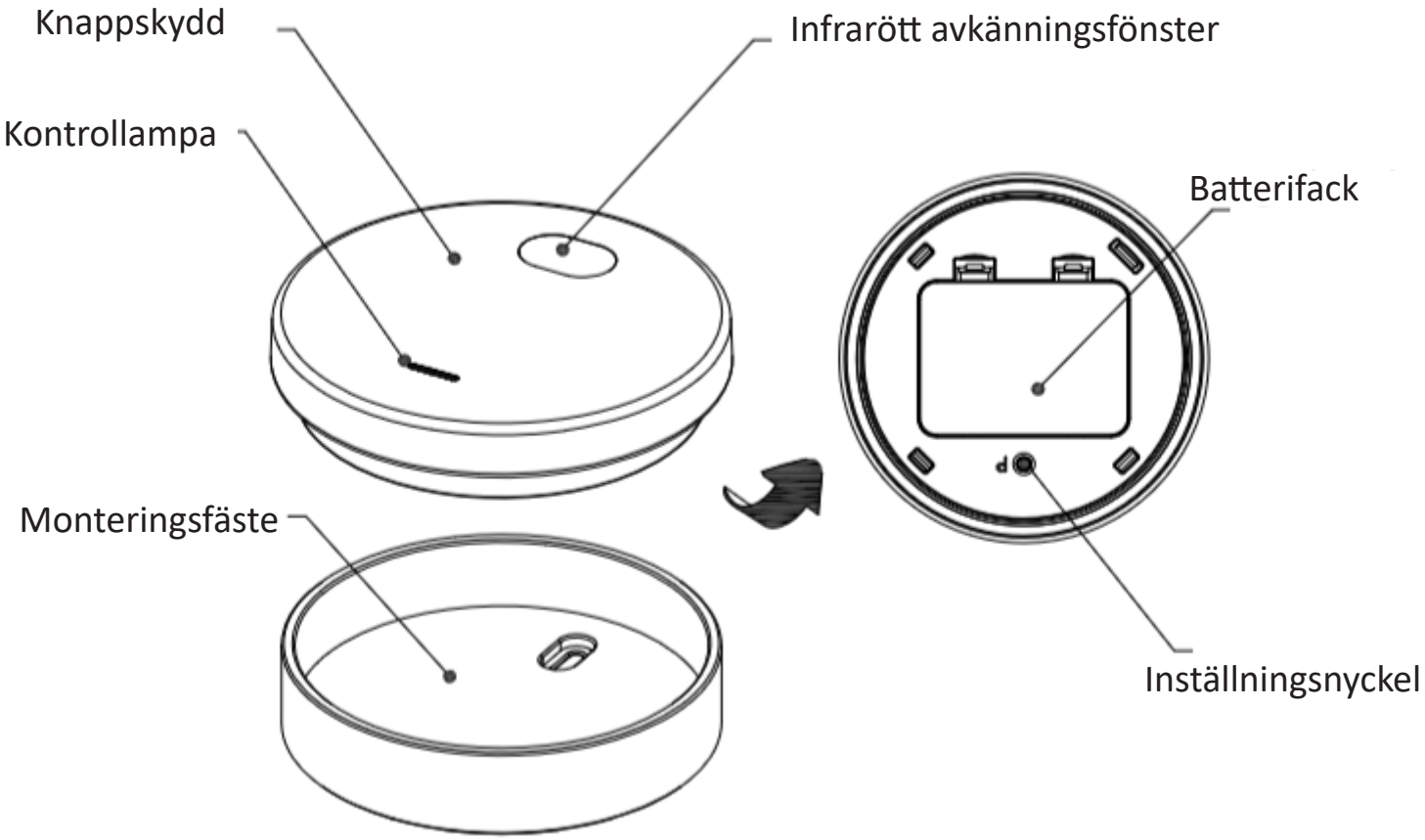

Bilderna är endast för referens.

Baktvätt/Framtvätt

När du sitter-
Tryck på knappen ”Tvätta” på fjärrkontrollen för att starta tvättprogrammet. Det stoppas automatiskt efter 3 minuter. Du kan stoppa tvätten manuellt innan dess genom att trycka på knappen ”Stopp”.

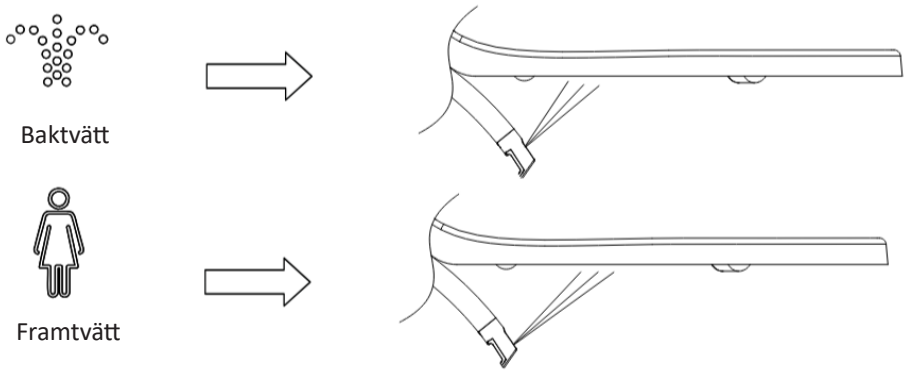

OBS: Under bak- eller framtvätt förlängs duscharmen och tvättar i ett fast läge i cirka 10 sekunder. Därefter följer en rörlig tvättfas på cirka 18 sekunder, innan duscharmen återgår till ett fast läge under resten av programmet.


Torkning

När du sitter-
Tryck på knappen ”Torkning” på fjärrkontrollen för att starta programmet. Det körs i 3 minuter.




Alternativt

Medan du sitter, med systemet i standby-läge-
Tryck på rotationsknappen (tillval) på sidan av systemet. Programmet körs i 3 minuter.

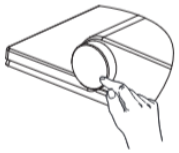

Massagetvätt

Under bak- eller framtvättprogrammet -
Tryck på massageknappen på fjärrkontrollen för att växla bland alternativen och välja önskad tvättfunktion av duscharmen:

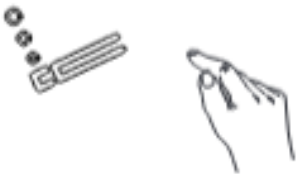


Oscillerande: När en indikatorlampa lyser

Pulserande: När två indikatorlampor lyser

Oscillerande + Pulserande: när tre indikatorlampor lyser


Stoppa driften

Under baktvätt, framtvätt eller torkprogram -
Tryck på “Stopp”-knappen på fjärrkontrollen för att stoppa det aktuella programmet

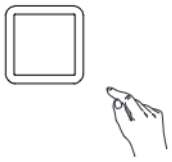


Alternativt

Tryck på rotationsknappen (tillval) för att stoppa det aktuella programmet

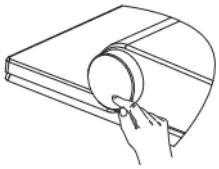


Justera vattenflödet

Under bak- eller framtvättprogrammet -
Tryck på knappen ”Justera vattenflödet” på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna ”Minska” eller ”Öka” för att justera flödeshastigheten.

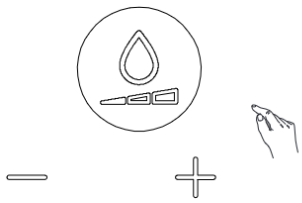


Alternativt

Justera vattenflödet genom att vrida på rotationsknappen (tillval). Flödet ökar när du vrider knappen medurs och minskar när du vrider den moturs.

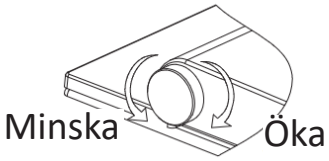


Justering av luftflödet

Under torkprogrammet -
Tryck på knappen ”Justera luftflödet” på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna ”Minska” eller ”Öka” för att justera flödeshastigheten.

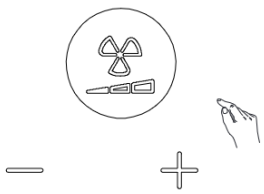

Alternativt

Justera luftflödet genom att vrida på rotationsknappen (tillval). Flödet ökar när du vrider knappen medurs och minskar när du vrider den moturs.

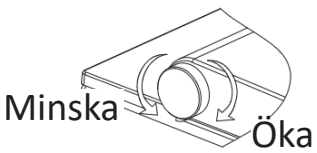

Justering av duschmunstyckets position

Under bak- eller framtvättprogrammet -
Tryck på knappen ”Justera position” på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna ”Minska” eller ”Öka” för att placera munstycket på rätt sätt.




Duschmunstycket är som standard inställt på position 5.




Justering av vattentemperatur

Tryck på knappen ”Justera vattentemperaturen” på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen ”Öka” eller ”Minska” för att justera vattentemperaturen.

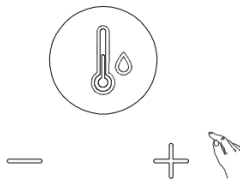


Alternativt

Under bak- eller framtvättprogrammet -
Håll rotationsknappen (tillval) intryckt samtidigt som du vrider den för att justera vattentemperaturen.

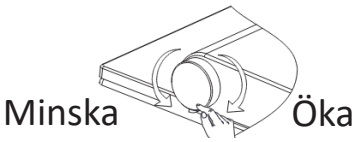


Justering av lufttemperatur

Tryck på knappen ”Justera lufttemperaturen” på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen ”Öka” eller ”Minska” för att justera lufttemperaturen.

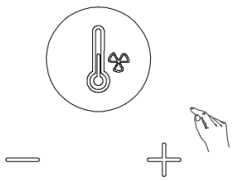


Alternativt

Under torkprogrammet -
Håll rotationsknappen (tillval) intryckt och vrid den. Lufttemperaturen ökar när ratten vrids medurs och minskar när den vrids moturs.

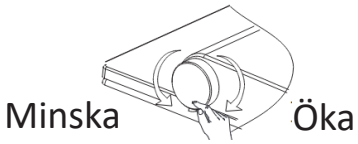


Justering av sitstemperatur

Tryck på knappen ”Justera sitstemperatur” på fjärrkontrollen och tryck sedan på knapparna ”Öka” eller ”Minska” för att justera temperaturen.

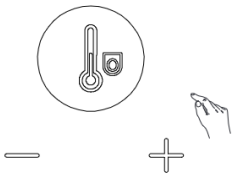

Aktivera eller avaktivera ljudet

Ljudet är på som standard och det kommer att höras ett pip när spol-torksitsen tar emot ett kommando eller en signal
Öppna locket och sitsen
Tryck och håll in rotationsknappen (tillval) och vrid det sedan. Ljudet slås på om det vrids medurs och stängs av om det vrids moturs.

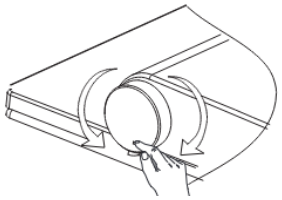

Ljusinställningar

Nattlampan är som standard i “alltid på”-läge-
Tryck upprepade gånger på knappen ”Nattlampa” på fjärrkontrollen för att växla mellan de olika inställningarna:




Avstängt läge - en indikatorlampa lyser

Alltid på-läge - två indikatorlampor lyser

Smart läge - tre indikatorlampor lyser

Alternativt


Öppna locket och sitsen. Vrid sedan rotationsknappen (tillval) moturs när du inte sitter på toaletten för att växla mellan nattlampans olika lägen.

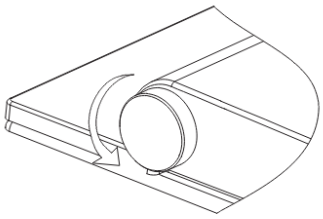

Obs: I “Smart”-läget tänds nattlampan automatiskt i mörka miljöer och släcks i ljusa miljöer.

Luktborttagningsinställningar (801687)

Håll in «Stopp» medan du trycker på knappen «Justera luftflödet» på fjärrkontrollen för att växla mellan de två olika inställningarna:

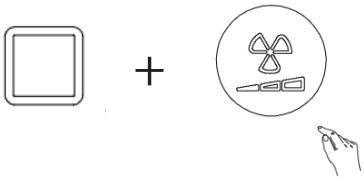

AV - en indikatorlampa lyser

Smart läge - två indikatorlampor lyser

Obs: “smart-läge” gör att luktborttagaren aktiveras när du sätter dig på toaletten, och stängs av en minut efter att du har rest dig.

Cisternspolning och Automatisk spolning (801687)

Tryck på «Cisternspolning» för att spola toaletten när som helst.



Automatisk spolning är aktiverad som standard, vilket innebär att toaletten spolar automatiskt efter användning.
För att aktivera eller avaktivera den automatiska spolningen och justera tidsfördröjningen håller du inne knappen ”Stopp” samtidigt som du trycker upprepade gånger på ”Cisternspolning” på fjärrkontrollen för att bläddra mellan de olika inställningarna.

AV – en indikatorlampa lyser

5 sek – två indikatorlampor lyser


10 sek – tre indikatorlampor lyser

15 sek – fyra indikatorlampor lyser



Inställningar för indikatorlampan

Indikatorlampan är tänd som standard.
Med locket öppet och medan du sitter på toaletten, utan att spol- eller torkfunktionen är aktiverad, håller du rotationsknappen (tillval) intryckt i 6 sekunder för att släcka indikatorlampan.
Upprepa samma procedur för att tända lampan igen.

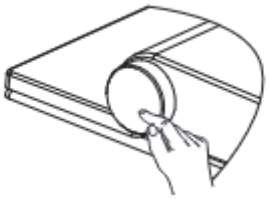


Inställningar för autoprogram

1. Tryck på knappen ”Autoprogram 1” på fjärrkontrollen för att starta följande program:
   Baktvätt (2 minuter) → Framtvätt (1 minut) → Torkning (4 minuter)

   Alternativt

   Du kan även starta autoprogram 1 med rotationsknappen (tillval) genom att vrida den medurs.




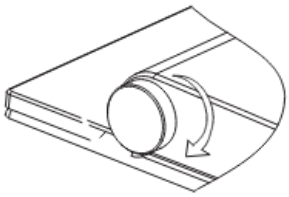


2. Tryck på knappen ”Autoprogram 2” på fjärrkontrollen för att starta följande program:
   Baktvätt (2 minuter) → Torkning (4 minuter)

   Alternativt

   Du kan även starta autoprogram 2 med rotationsknappen (tillval) genom att vrida den moturs.

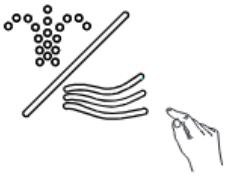

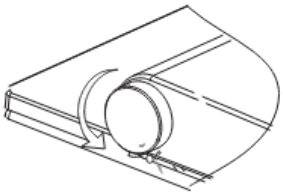


Obs:
Om du trycker på rotationsknappen under autoprogram 1 eller 2 går programmet vidare till nästa steg.
För att avbryta autoprogram 1 eller 2 håller du rotationsknappen intryckt i 2 sekunder.

Inställningar för energisparläge (standby)

När du inte sitter på toaletten och locket är stängt håller du rotationsknappen (tillval) intryckt i mer än 6 sekunder för att försätta spol- och torktoaletten i standbyläge.


För att aktivera toaletten igen håller du rotationsknappen intryckt i ytterligare 6 sekunder.

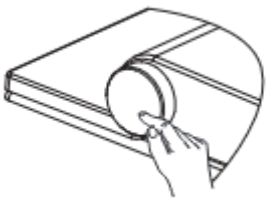


Instruktioner för One-touch-kontrollen till Clean Comfort

Fjärrkontrollen (801689) har följande funktioner:

- Huvudfunktion:
  När du sitter på toaletten trycker du en kort stund med handen eller foten på knappen på One-touch-kontrollen för att starta autoprogram 1.

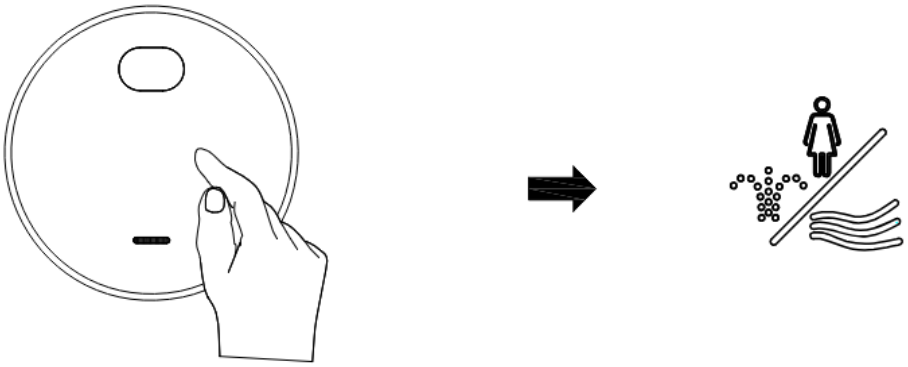

- Vågfunktion:
  Håll handen/foten en kort stund framför det infraröda avkänningsfönstret medan du sitter på toaletten för att starta autoprogram 2.

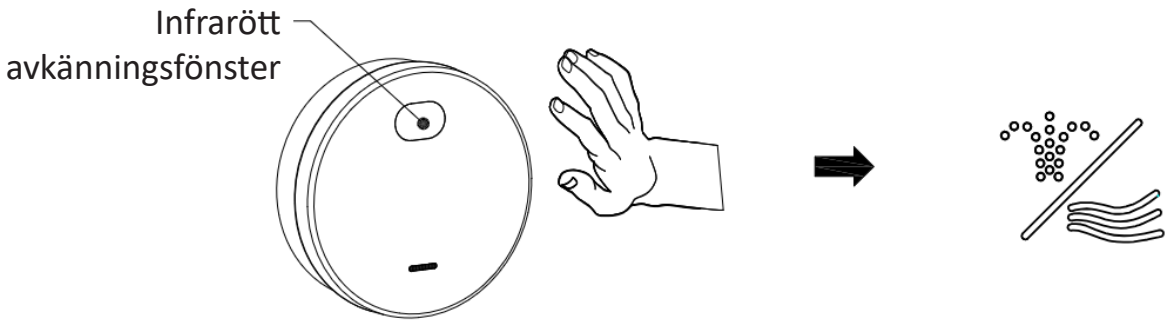

Allmänna rekommendationer för skötsel och rengöring

Clean Comfort är ett hjälpmedel för personlig hygien som är avsett för upprepad användning i hem- och vårdmiljöer. Rengöring och eventuell desinfektion utförs manuellt. Desinfektion ska ske på låg nivå.

Följande metoder får inte användas:
- Sterilisering
- Desinfektion på hög nivå
- Nedsänkning av enheten eller dess komponenter i vätska
- Högtryckstvätt eller ångrengöring

Underhållsintervall	Underhållsåtgärd
Dagligen	Ta bort vattendroppar med en mjuk, luddfri trasa för att undvika kalkfläckar
Veckovis	Rengör alla ytor på bidén. Kontrollera och rengör även duschmunstycket manuellt vid behov (sida 20)
Månadsvis	Rengör toalettens keramiska delar med ett rengöringsmedel med låg syrahalt
Var 6:e månad	Kontrollera och byt filter vid behov
Årligen	Avkalka enheten (sida 21)

Kompatibla rengörings- och desinfektionsmedel

Clean Comfort har bedömts avseende material- och funktionskompatibilitet med följande rengörings- och desinfektionsmedel när de används uteslutande i enlighet med denna bruksanvisning:

- TASKI Sani Cid Pur-ECO SD W1e
- Terralin Protect
- Rely+ON PeraSafe

Kompatibilitet gäller endast när dessa produkter används enligt tillverkarens anvisningar och denna bruksanvisning, inklusive applicering med mjuka, icke-slipande dukar eller svampar, följt av sköljning med rent kallt vatten och torkning. Användning av andra kemiska medel eller rengöringsprodukter rekommenderas inte, såvida deras kompatibilitet inte uttryckligen har bekräftats av tillverkaren.

Rengöringsmetoder och eventuell desinfektion:

Rengöringsmedel	Typologi
TASKI Sani Cid Pur-ECO SD W1e*	**Rengöringsmedel för toalett / badrum**
Terralin Protect	**Desinfektionsmedel och allmänt biocidprodukt**
Rely+ON PeraSafe*	**Desinfektionsmedel [dictionary...everso.net]**

IP-ansvarsfriskrivning

Referenser till tredjepartsprodukter
Hänvisningar till specifika rengörings- och desinfektionsmedel, inklusive deras varumärken och tillverkare, lämnas endast i informationssyfte.
Alla varumärken, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter tillhör respektive rättighetsinnehavare. Sådana hänvisningar innebär varken certifiering eller juridiskt godkännande av produkterna och ska inte heller tolkas som att det finns något kommersiellt samarbete.


Tillverkaren av hjälpmedlet tar inget ansvar för eller påtar sig några skyldigheter avseende tredjepartsprodukternas regulatoriska status, sammansättning eller tillgänglighet.

Godkänd rengöringsmetod

För att säkerställa säker användning, bibehållen funktion och lång livslängd ska hjälpmedlet rengöras och vid behov desinfekteras enligt följande metod. Anvisningarna ska följas utan avvikelser.

1. Applicera rengörings- eller desinfektionsmedlet endast på något av följande:
   -En mjuk, icke-slipande mikrofiberduk för engångsbruk
   -En mjuk engångsduk av cellulosa
   -En icke-slipande svamp med öppna celler (t.ex. WipeOut-svamp).
2. Torka av enhetens ytor i ordning från de minst förorenade till de mest förorenade ytorna.
3. Spraya aldrig rengörings- eller desinfektionsmedel direkt på enheten.
4. Skölj alla behandlade ytor med rent, kallt vatten efter avtorkningen för att avlägsna eventuella kemikalierester. En handhållen lågtryckspruta eller nebulisator kan med fördel användas.
5. Torka alla ytor med en mjuk engångsduk av något av de material som anges i punkt 1.

Denna procedur gäller för alla ytor som användaren kan komma åt, inklusive sitsen, armstöden, ryggstödet, manöverreglagen och enhetens yttre hölje.

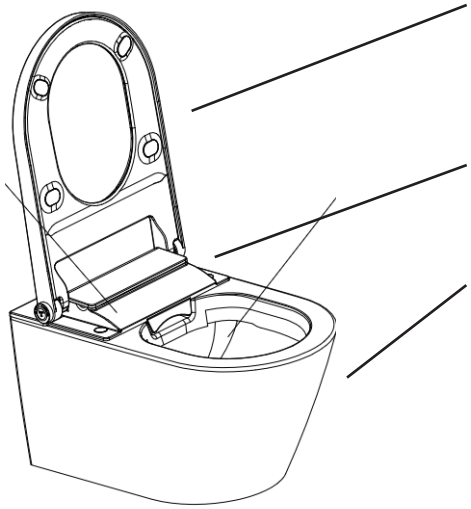

Illustrerat

För WC-stödhandtag

- Fuktig mjuk duk eller svamp (enligt föregående avsnitt)

För toalettsits med bidéfunktioner

- Enligt föregående avsnitt

För WC-skål i keramik

- Mjuk toalettborste av silikon

Använd rengöringsmedel som anges i avsnittet ovan

Slipande verktyg, direkt sprayning, nedsänkning eller applicering av kemikalier med andra metoder än de som beskrivs ovan är inte tillåtna.

Otillåten rengöringsmetod

För att förhindra skador, försämrad funktion eller förkortad livslängd är följande strikt förbjudet:

- Användning av slipande dukar, borstar eller svampar.
- Blötläggning eller nedsänkning av enheten i vätska, eller att vätska tränger in i mekanismen.
- Direkt applicering av rengörings- eller desinfektionsmedel genom sprayning eller skumbildning på enhetens ytor.
- Användning av icke godkända sura, alkaliska eller oxiderande rengöringsmedel.
- Användning av överdriven mekanisk kraft vid rengöring.

Avvikelser från kemikalietillverkarens instruktioner eller från anvisningarna i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på ytor, rörliga delar eller bärande konstruktioner.

Självrengöring - tank


Om systemet inte har använts på mer än 72 timmar startar ett självrengöringsprogram som pågår i cirka 3 minuter. Under programmet är alla knappar och funktioner inaktiverade. När programmet har slutförts återgår systemet automatiskt till normal drift.


Rengöring av duschmunstycke


Duschmunstycket rengörs automatiskt före och efter varje tvätt.


Manuell rengöring av duschmunstycket:


1. Öppna locket och sitsen
2. Vrid rotationsknappen medurs. Duschmunstycket skjuts då ut och rengörs med vatten.
3. Duschmunstycket dras automatiskt in efter 5 minuter. Du kan också trycka på knappen ”Stopp” för att avbryta rengöringen och dra in duschmunstycket tidigare.

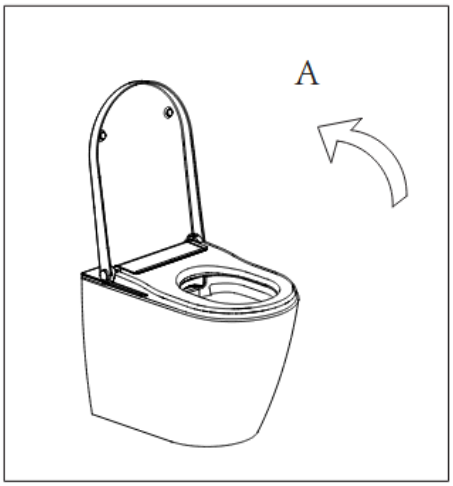

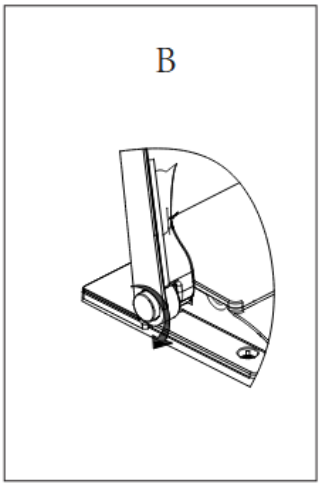

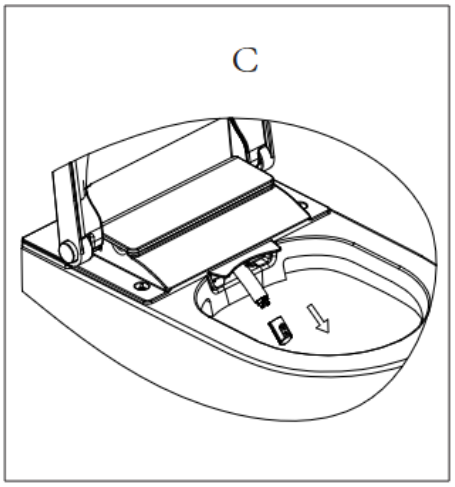

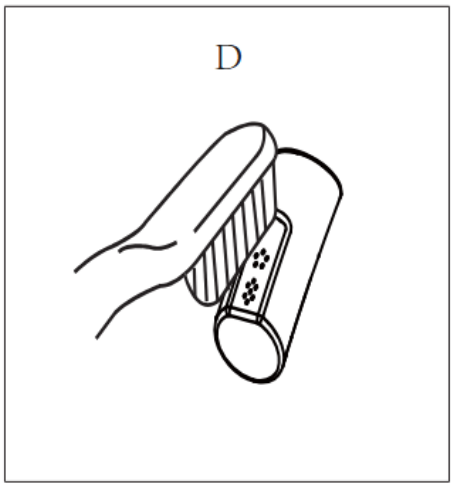


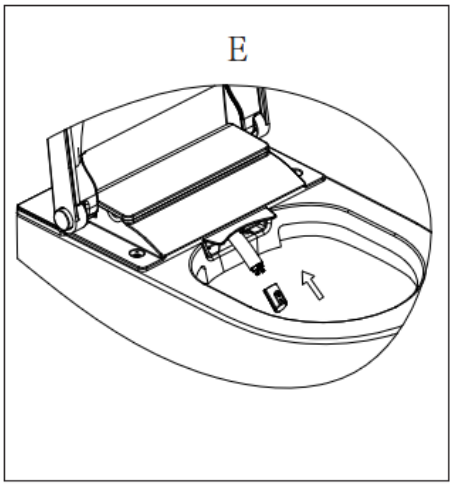

Byte av vattenfilter

Filtret har en livslängd på 6 månader, beroende på vattenkvalitet
Filtret ska bytas om genomströmningen av tvättvattnet har minskat

900986
Vattenfilter - Clean Comfort

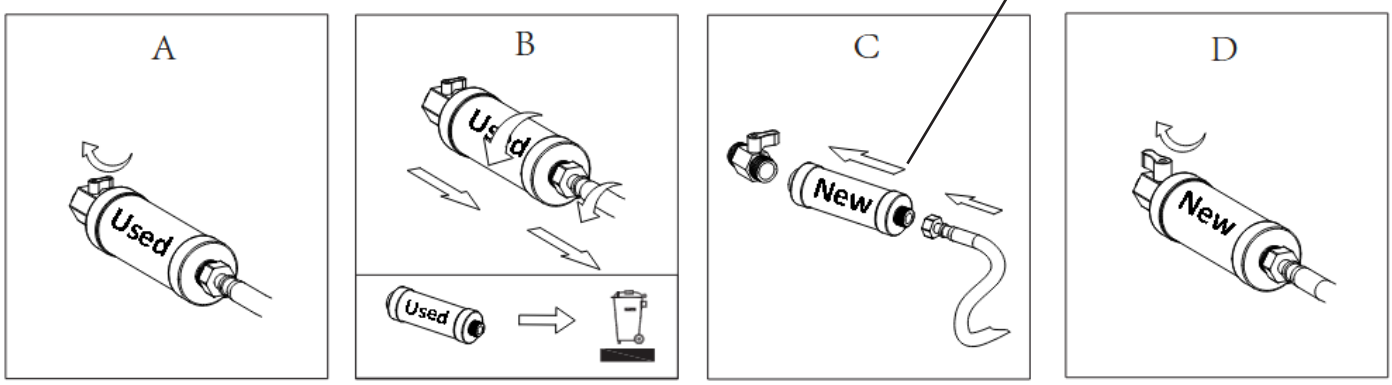

Avkalking av enheten

Systemet ska avkalkas minst en gång per år, eller oftare beroende på antalet tvättcykler och vattenkvaliteten.


Toaletten kan användas under avkalkningen, men tvättfunktionerna är då inte tillgängliga.

Avkalkningen kan ta upp till 30 minuter. Under processen blinkar en grön LED-lampa och enheten avger en ljudsignal. När den gröna LED-lampan slutar blinka och slocknar är avkalkningen klar och tvättfunktionerna kan användas igen.
Använd ett avkalkningsmedel med låg skumbildning.

För att undvika skador på enheten eller personskador får avkalkningsmedel som är för starka eller aggressiva inte användas.

1

Öppna lock och sits

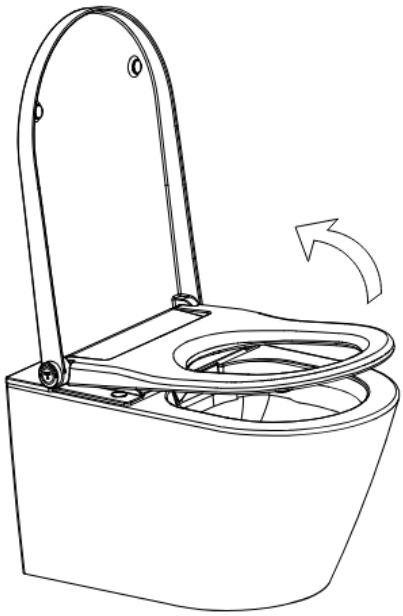

2


Öppna avkalkningslocket



När avkalkningslocket öppnas startar tömning av vatten från tanken, vilket skapar utrymme för avkalkningsmedlet. Tillsätt avkalkningsmedlet efter att du hör ett ”pip” från maskinen.


3

Öppna gummilocket

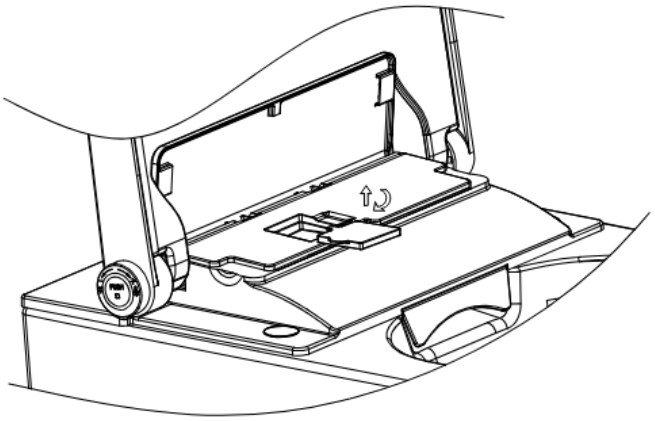


4

Tillsätt cirka 150 ml avkalkningsmedel

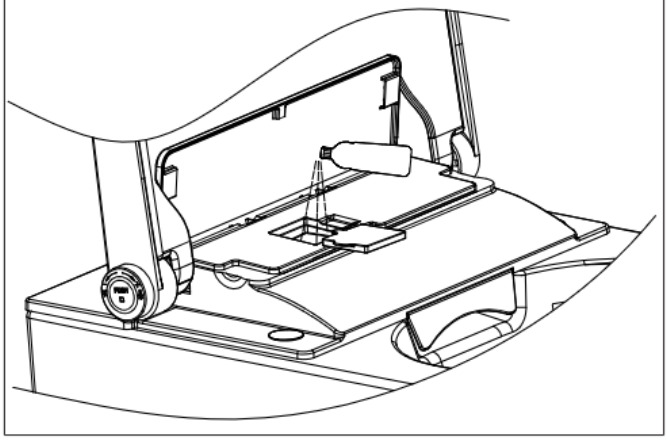

5

Stäng gummilocket och avkalkningslocket

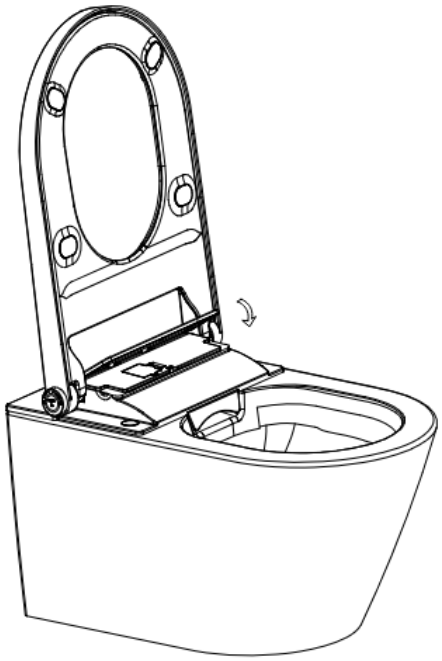


6


Avkalkningsprocessen startar när locket stängs. Under processen kan toaletten användas, men tvättprogrammen är inte tillgängliga.


Processen tar cirka 30 minuter.
Under tiden blinkar LED-lampan på rotationsknappen. När lampan slutar blinka tänds andningsljuset igen, om det inte har stängts av, och en lång ljudsignal hörs. Detta indikerar att tvättprogrammen åter är tillgängliga.

Byte av luktfiltret

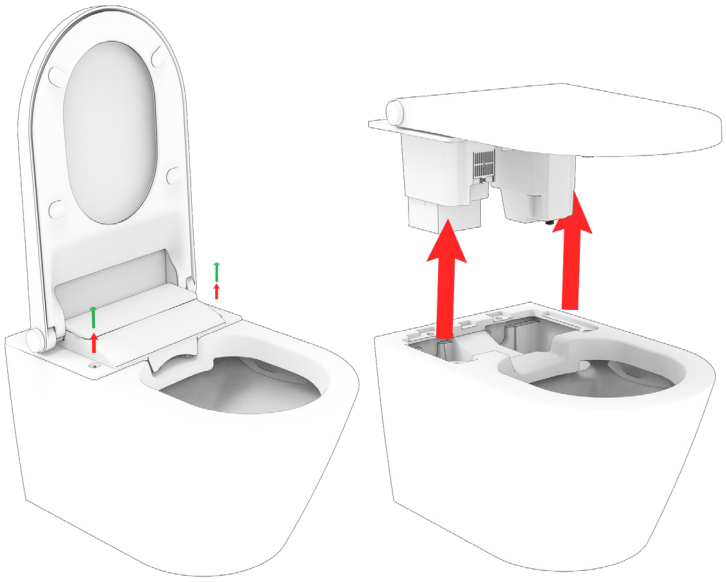

Luktfiltret har en rekommenderad livslängd på cirka 6 månader

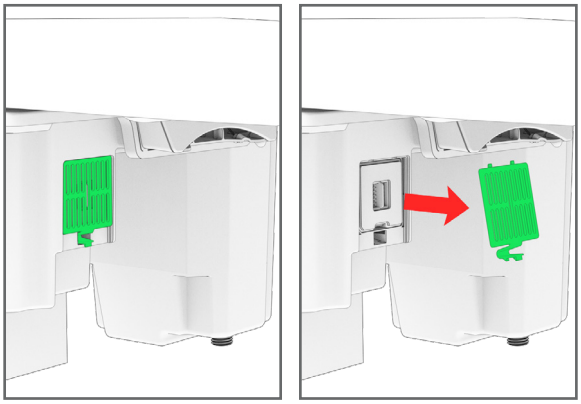

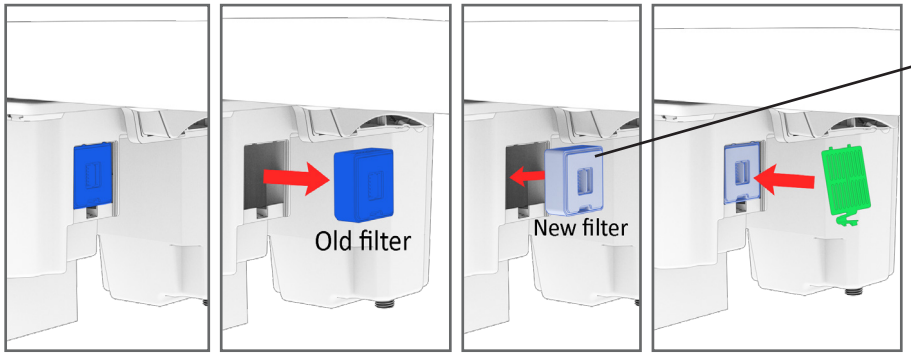



900989
Luktfilter – Clean Comfort

Du kan märka att luktborttagningen blir mindre effektiv när filtret närmar sig slutet av sin livslängd.

Tömning av vattentanken

1. Vatten- och strömförsörjningen måste stängas av eller kopplas bort innan bidén demonteras.
2. Luta eller vänd inte enheten förrän vattentanken är tömd.

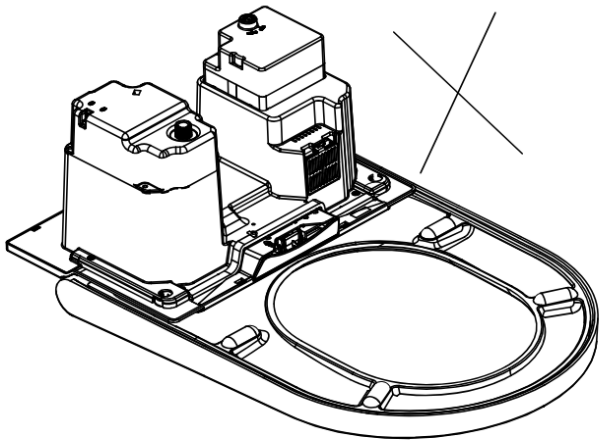

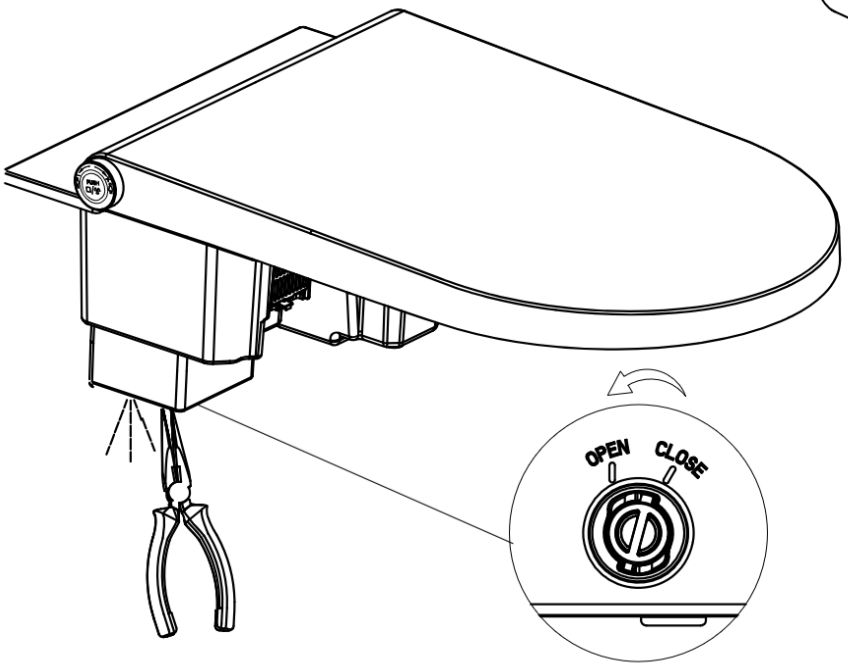


1. Använd en tång för att vrida pluggen till läget ”Open” och dra ut den. Vatten börjar då rinna ut ur tanken.
2. När vattnet har slutat rinna, sätt tillbaka pluggen och vrid den till läget ”Closed”.

Parkoppling av fjärrkontroll

Om flera elektroniska bidéer installeras i samma område och du vill att varje fjärrkontroll endast ska styra en specifik bidé, slutför installationen genom att följa någon av metoderna nedan.


Metod 1

1. Öppna både locket och sitsen. Sätt dig inte på bidén.

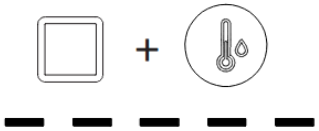

2. På fjärrkontrollen: håll knapparna ”Stopp” och ”Vattentemperatur” intryckta samtidigt tills alla fem LED-lampor lyser. Släpp sedan knapparna.

3. Tryck på ”–” och ”+” för att välja en unik kod för varje elektronisk bidé.

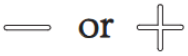

4. På bidén: tryck kort på rotationsknappen och släpp den.




5. På fjärrkontrollen: tryck kort på knappen ”Stopp”. Bidén avger då en lång ljudsignal som bekräftar att parkopplingen är slutförd.

Metod 2 – Alternativ parkoppling

1. Håll knappen ”Framtvätt” på fjärrkontrollen intryckt i cirka 5 sekunder. Indikatorlamporna tänds därefter i tur och ordning. Efter en kort ljudsignal börjar lamporna blinka.




2. Tryck på sidoknappen (tillval) på bidén. Indikatorlamporna på fjärrkontrollen slutar blinka och lyser med fast sken i 2 sekunder. När en lång ljudsignal hörs är parkopplingen slutförd.

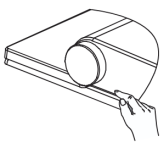

Byte av batterier – fjärrkontroll

- Fjärrkontrollen kräver två batterier (3V CR2032)
- När indikatorlamporna blinkar kontinuerligt indikerar detta att batterierna snart bör bytas

1. Försök inte att ladda icke-uppladdningsbara batterier
2. Uppladdningsbara batterier ska tas ur fjärrkontrollen innan de laddas
3. Blanda inte nya och använda batterier i fjärrkontrollen
4. Batterierna skall sättas in med korrekt orientering och polaritet
5. Använda batterier skall tas ut och kastas på korrekt plats
6. Om fjärrkontrollen inte skall användas över en längre tid, skall batterierna tas ut för lagring
7. Kortslut inte polerna i fjärrkontrollen

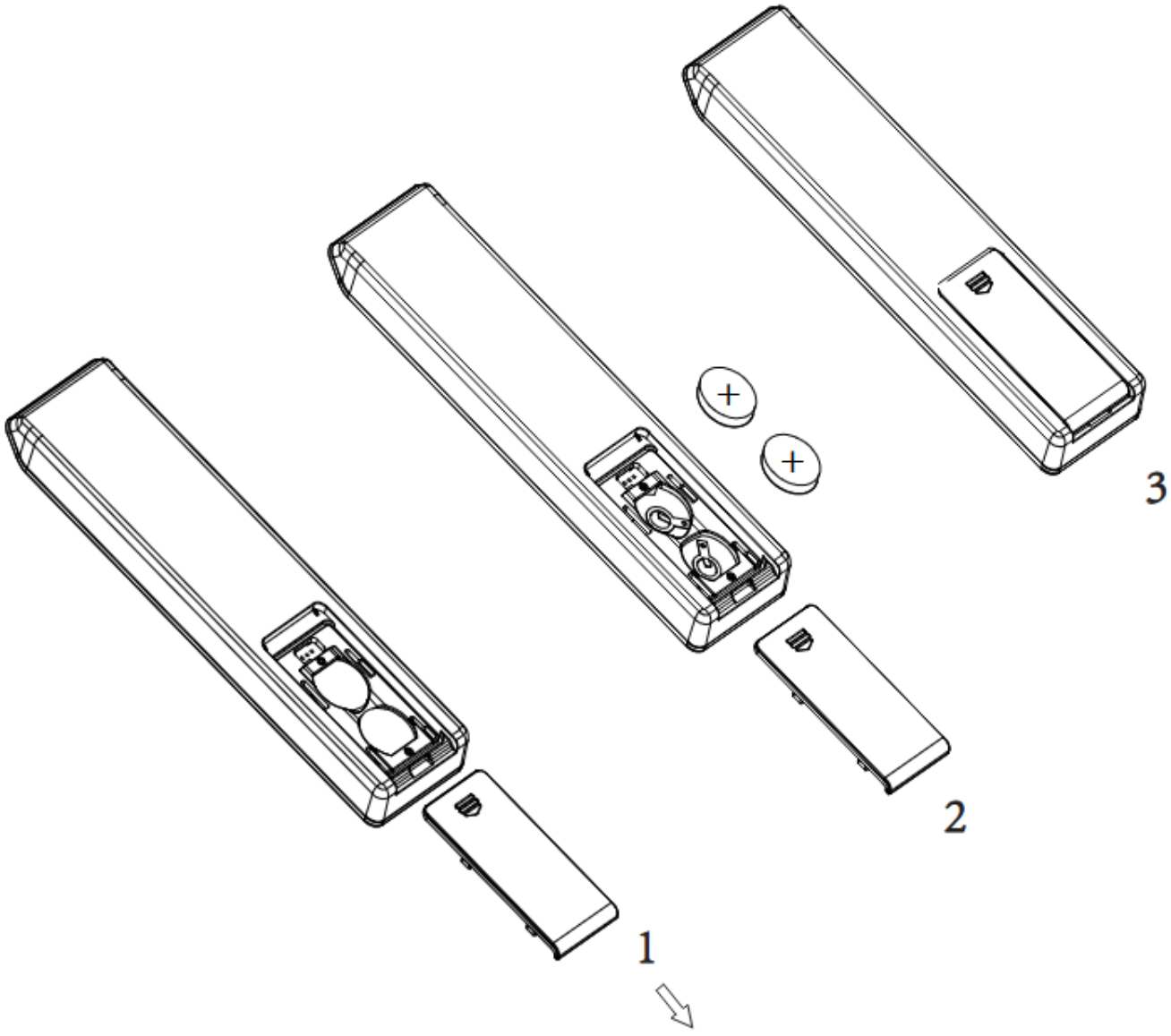

Återställ fabriksinställningar för fjärrkontrollen

När batterierna har tagits ur och satts i igen tänds indikatorlamporna. Håll knappen ”Stopp” på fjärrkontrollen intryckt tills indikatorlamporna tänds en efter en. Släpp sedan knappen. Parkopplingen är nu slutförd.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Tvättprogrammet fungerar inte	Strömförsörjningen är eventuellt inte ansluten	Kontrollera att strömmen är korrekt ansluten och påslagen
	Vattenförsörjningen är eventuellt inte ansluten	Kontrollera att vattnet är korrekt anslutet och påslaget
	Filtret kan vara igensatt	Byt filtret – det har en livslängd på cirka 6 månader
	Bidén är inte i sittläge	Sätt dig på bidén och justera sittställningen
	Toalettlocket är stängt	Öppna toalettlocket och sätt dig på sitsen
	Bidéfunktionerna har inte använts på över 72 timmar	Bidén utför självrengöring i cirka 3 minuter – tvätt är inte tillgänglig under denna tid
Duschmunstycket dras plötsligt in	Tvättcykeln avslutas automatiskt efter 3 minuter	Detta är normalt – du kan trycka på ”tvätt” knappen igen för att starta programmet på nytt
	Problem med vattenförsörjningen	Kontrollera anslutning och flöde vid vatteninloppet
	Sensorn känner av att ingen sitter på sitsen.	Justera sittställningen och försök igen
	Toalettlocket stängs	Fäll inte ner toalettlocket under tvättningen.
Låg vattenmängd	Flödet kan vara inställt för lågt	Detta kan justeras via fjärrkontrollen eller rotationsknappen
	Vattentrycket är för lågt	Säkerställ att vattentrycket är ≥ 0,07 MPa
	Filtret kan vara igensatt	Byt filtret – det har en livslängd på cirka 6 månader
	Duschmunstycket kan vara blockerat	Rengör eller byt duschmunstycket
Låg vattentemperatur	Vattentemperaturen kan vara inställd för lågt	Detta kan justeras via fjärrkontrollen eller rotationsknappen
	Temperaturen på vattenförsörjningen kan vara för låg	Höj vattentemperaturen och/eller minska vattenmängden
Duschmunstycket körs ut mycket långsamt	Duschmunstycket kan vara i självrengöringsläge	Detta är en del av normal drift
Vatten rinner ut, men munstycket körs inte ut	Duschmunstycket kan vara i självrengöringsläge	Detta är en del av normal drift
	Bidéfunktionerna har inte använts på över 72 timmar	Bidén kommer att utföra självrengöring i cirka 3 minuter – tvätt är inte tillgänglig under denna period
Torkfunktionen fungerar inte	Strömförsörjningen är eventuellt inte ansluten	Kontrollera att strömmen är korrekt ansluten och påslagen
	Bidén är inte i sittläge.	Sätt dig på Bidén och justera sittställningen
	Toalettlocket är stängt	Öppna toalettlocket och sätt dig på sitsen
	Bidéfunktionerna har inte använts på över 72 timmar	Bidén kommer att utföra självrengöring i cirka 3 minuter – torkfunktionen är inte tillgänglig under denna period
Låg lufttemperatur	Lufttemperaturen kan vara inställd för lågt	Detta kan justeras via fjärrkontrollen eller rotationsknappen
	Luftvärmaren fungerar inte korrekt	Kontakta Bano
Nattljuset är alltid av	Omgivningen är för ljus	I smart-läge tänds ljuset endast i mörka miljöer
	Nattljusinställningen kan vara avstängd	Detta kan slås på/av via fjärrkontrollen

Nattljuset är alltid på	Omgivningen är för mörk	I smart-läge släcks ljuset endast i mörka miljöer
	Något täcker knappen/sensorn	Ta bort eventuella hinder från detta område
	Ljuset kan vara inställt på ”Alltid på”	Detta kan slås på/av med fjärrkontrollen eller rotationsknappen
Duschmunstycket dras automatiskt in under manuell rengöring	Duschmunstycket dras in efter 5 minuter	Detta är normalt – processen kan startas om om du inte är färdig med rengöringen
	«Stopp»-knappen har tryckts in	Rengöringsprocessen stoppas och duschmunstycket dras in om denna knapp trycks
	Toalettlocket stängs	Fäll inte ner toalettlocket under rengöringen.
Fjärrkontrollen fungerar inte	Det kan vara ett problem med batteriernas installation	Kontrollera att båda batterierna är korrekt installerade
	Batterikapaciteten kan vara låg	Byt batterierna
	Fjärrkontrollen kan vara ansluten till fel bidé	Kör en-till-en-inställningen för att synkronisera rätt fjärrkontroll och bidé
Det hörs pipljud medan bidén används	Pipljud hörs när man sätter sig ner, reser sig upp och trycker på knappar	Detta är normalt och kan slås på/av via fjärrkontrollen eller rotationsknappen
Bidén fungerar inte korrekt	Det föreligger ett mekaniskt eller elektriskt fel	Stäng av strömmen till enheten i en minut, slå sedan på igen och försök på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta Bano
Ljuset runt rotationsknappen blinkar två gånger och piper kontinuerligt	Temperaturen på vattenförsörjningen är för hög	Stäng av ström- och vattenförsörjningen, avstå från att använda enheten och kontakta Bano
Ljuset runt rotationsknappen blinkar kontinuerligt	Det kan föreligga ett problem med bidén	Konrollera ström- och vattentillkoppling, slå av strömmen och starta enheten på nytt. Om problemet fortsätter, kontakta Bano

Elektriska apparater och batterier får inte slängas bland osorterat hushållsavfall. Använd alltid separata, godkända insamlings- och avfallssystem.
Kontakta lokala myndigheter för information om hur enheten och dess komponenter ska avfallshanteras på rätt sätt.
Felaktig hantering av elektriska apparater och komponenter kan leda till att farliga ämnen läcker ut i miljön och orsakar skador.
Vid köp av en ny apparat är återförsäljaren enligt lag skyldig att kostnadsfritt ta emot den gamla apparaten för korrekt avfallshantering, i de fall reglerna om återtagande är tillämpliga.

Reservdelar

Namn på artikel	Art.nr.
Toalettsits med lock för Clean comfort Vit	900966
Vattenpump Clean comfort	900985
Vattenfilter Clean comfort	900986
Fjärrkontroll Clean comfort	801687
Vattentankmodul Clean comfort	900988
Luftfilter – Clean Comfort	900989
Munstyckssats Clean comfort	900990
Inloppsventil för Clean comfort	900991
Elektronisk modul – Clean Comfort	900616
Moderkort Clean Comfort	140201
Fläktenhet Clean Comfort	900814

Placering av produktmärkning och identifiering

